

# 未来型 Dry Bath 『サーモQ』

Hot-Lid 付き、  
プログラムブロックインキュベーター！



Hot-Lid付きDry-Bathは、今までにない未来型Dry Bathです。今までThermal Cyclerを代用として行っていた作業を、簡単で小型化、しかも安価なモデルがついに登場しました！

## 【特長】

- Hot-Lid 付きBlock-Unitは5種類から選択できます。
- PC接続により、温度・時間などプログラムが可能で、リアルタイムに温度状態をモニタリングできます。
- Hot-Lid のOn/Off機能や取り外しも可能です。
- Hot-Lid の温度は、PC(ソフト)で設定できます。
- Block-unit は容易に取り外し出来るので交換作業や修理の時に大変便利です。
- 高性能なTE(ペルチェ)を使用しています。(平均寿命200,000時間)
- 付属品にはCDソフトとUSBケーブル、DC24V電源が入っています。



## 【仕様】


- ・ 温度範囲 : 0°C~100°C
- ・ 温度精度 : ±0.5°C
- ・ 温度制御 : ±0.2°C
- ・ 加温時間 : 12分以下 (30°C→100°C)
- ・ 冷却時間 : 12分以下 (RT→4°C)
- ・ タイマー : 0~99時間59分 or ∞
- ・ サ イ ズ : (W) 170mm × (D) 150mm × (H) 145mm
- ・ 重 量 : 3.0kg




- \* プログラムを設定しPCからインストール
- \* 温度変化をPCに表記

# サーモQ Programable Cooling & Heating Block


ヒートリッド付きプログラムブロックインキュベーター

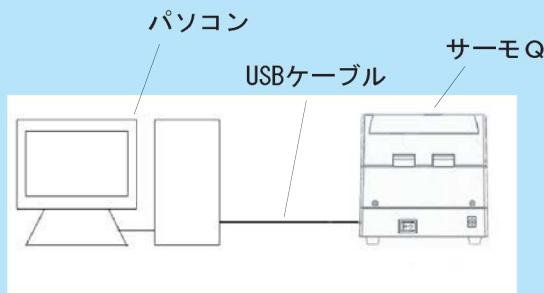



接続図

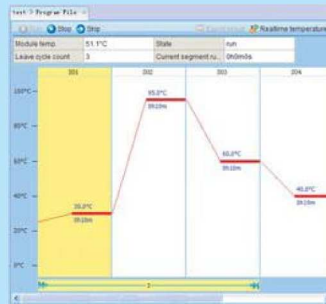

プログラム設定画面

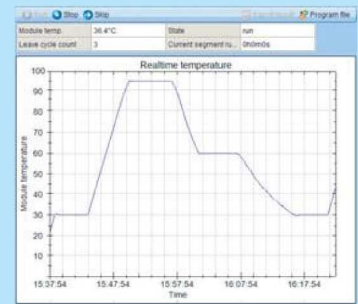

リアルタイム設定画面

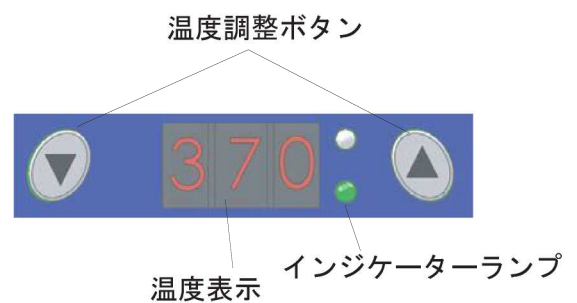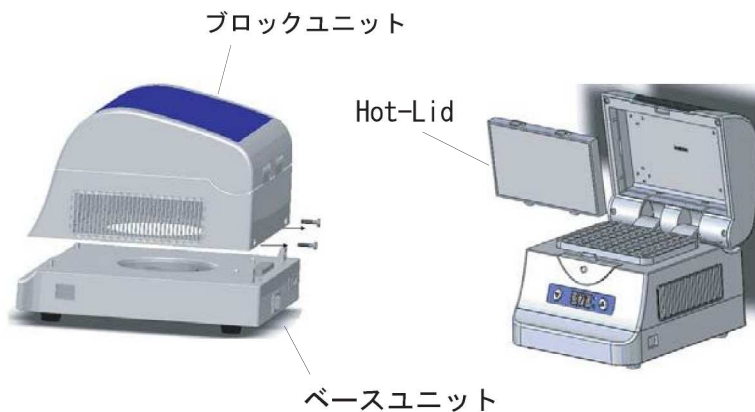

## 本体

カタログNO.	品名	入数	価格
CHB-T2-A	サーモQ 1.5mL×15本、0.5mL×20本ブロック付き	1台	¥140,000
CHB-T2-B	サーモQ 1.5mL×35本ブロック付き	1台	¥140,000
CHB-T2-C	サーモQ 0.5mL×54本ブロック付き	1台	¥140,000
CHB-T2-D	サーモQ 0.2mL×96本ブロック付き	1台	¥140,000
CHB-T2-E	サーモQ 2.0mL×35本ブロック付き	1台	¥140,000

## オプション

カタログNO.	品名	入数	価格
CHB-A	1.5mL×15本、0.5mL×20本ブロック	1台	¥56,000
CHB-B	1.5mL×35本ブロック	1台	¥56,000
CHB-C	0.5mL×54本ブロック	1台	¥56,000
CHB-D	0.2mL×96本ブロック	1台	¥56,000
CHB-E	2.0mL×35本ブロック	1台	¥56,000
CHB-BA	ベースユニット	1台	¥100,000
HLD	ホットリッドヒーティングセクション	1台	¥38,000

IEDA 家田貿易株式会社 <https://www.ieda.co.jp/boeki/>  
E-mail: boeki@ieda-group.co.jp

東京本社 〒113-0033東京都文京区本郷3-14-16 オフィス家田  
TEL. 03-3816-2861 FAX. 03-3814-5347

大阪営業所 〒564-0053大阪府吹田市江の木町13-9 江坂シビル館Ⅱ401  
TEL. 06-6338-1518 FAX. 06-6338-5626

札幌営業所 〒001-0015北海道札幌市北区北15条西2丁目2-11チケン北大前105号  
TEL. 090-2226-5660 TEL/FAX. 011-709-2755

熊本営業所 〒861-8035熊本県熊本市東区御領6-7-39  
TEL. 096-285-1907 FAX. 096-285-1908

仙台営業所 〒980-0821宮城県仙台市青葉区春日町10-23第1春山ビル2階H号  
TEL. 022-395-9878 FAX. 022-395-9879

沖縄営業所 〒901-0146沖縄県那覇市具志1丁目9番21号 CASA ZERO102号  
TEL. 090-2210-7721 TEL/FAX. 098-859-6271