

ゲル撮影装置 DigiPrint シリーズ

デジプリント mini CCD or デジプリント DOC/CCD から選べます！

DigiPrint mini CCD & DigiPrint DOC/CCD

デモ機にてご確認ください

コストパフォーマンス抜群!!

CCDでも、撮影・印刷もピ・ポ・パ デジカメより簡単で早い!!

DigiPrint Mini CCD

CCDカメラ式 ミニゲル専用 LED用

キャンペーン金額 **¥298,000**



撮影範囲 110 x 80mm

製品名	仕様	型式	金額	キャンペーン金額
デジプリントMiniCCD LED用	DP-MINI-LD		¥380,000	¥298,000
デジプリントMiniCCD UV用	DP-MINI-UV		¥410,000	¥328,000

ミニゲル専用モデル (撮影範囲 110x80mm)	
カメラ	130万画素 1/2 inch. mono CMOS
レンズ	単焦点 16mm F1.4-C
撮影範囲	110 x 80mm
Software	MISVSソフトウェア
TabletPC	Windows10 32bit 8.9inchTFT
暗ボックス	フード式 全面扉付 W220 x D220 x H260mm
カメラを含むサイズ	W220xD220xH350mm

DigiPrint Mini CCD

CCDカメラ式 ズームレンズモデル UV用

キャンペーン金額 **¥398,000**



撮影範囲 180 x 160mmまで

製品名	仕様	型式	金額	キャンペーン金額
デジプリントMiniCCDz LED用	DP-MINIZ-LD		¥460,000	¥368,000
デジプリントMiniCCDz UV用	DP-MINIZ-UV		¥498,000	¥398,000

ズームレンズモデル (撮影範囲 180x160mm)	
カメラ	130万画素 1/2 inch. mono CMOS
レンズ	ズーム 4-48mm F1.0-C
撮影範囲	180 x 160mm
Software	MISVSソフトウェア
TabletPC	Windows10 32bit 8.9inchTFT
暗ボックス	フード式 全面扉付 W220 x D220 x H260mm
カメラを含むサイズ	W220xD220xH420mm

DigiPrint DOC/CCD

CCDカメラ式 ズームレンズ DOCモデル

キャンペーン金額 **¥498,000**




撮影範囲 200 x 200mmまで

製品名	型式	金額	キャンペーン金額
デジプリントDOC/CCD	DP-T130Z	¥628,000	¥498,000
LED落射筋起光源2灯(470nm)	DP-LED2B	¥60,000	¥48,000
LED落射筋起光源4灯(470nm)	DP-LED4B	¥120,000	¥90,000

* LED 落射筋起光源は本体に追加するオプションです。

ズームレンズモデル (撮影範囲 200x200mm)	
カメラ	130万画素 1/2 inch. mono CMOS
レンズ	ズーム 8-48mm F1.0-C
撮影範囲	200 x 200mm
Software	MISVSソフトウェア
TabletPC	Windows10 32bit 10.1inchTFT
フィルター収納	4穴フィルターターレット
撮影フィルター	590nmマルチコートフィルター
暗ボックス	DOC式 3面扉付 LED白色庫内灯付
カメラを含むサイズ	W270xD270xH500mm (PC含む)
付属品	ゲルトレー

CCDモデル TabletPC 専用ソフトウェア (MISVS)

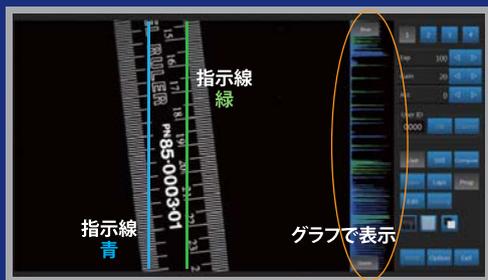

* タッチで簡単操作

画像撮影もプリントもタブレットPCの特性を生かしてタッチで完了できます。

* 3タッチでプリントアウト

ソフトウェアを立ち上げて3タッチでプリント完了。

* リアルタイムダイナミックレンジ表示

ライン上の輝度値をグラフで表示、2本表示で量の簡易比較ができます。

* サチュレーション表示

オーバー露光部分を赤反転で表示可能。

* 積算モードも搭載

弱いシグナルも積算モードで感度アップ可能

* 白黒反転

リアルタイムでも保存画像でも白黒反転可能

* グリッド表示

画面上に格子のグリッドを表示できます。

* 画像の重ね合わせ

3枚までの画像を簡単に重ね合わせ、個別に画像編集や疑似カラー付も可能。

* タイムラプス撮影


経時変化の撮影に使えるタイムラプス機能を搭載。

* 画像に文字の記入が可能

Editモードで文字も記入でき、文字とバックの色も指定可能。

Option

LED透過イルミネーター

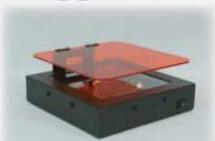

LED透過イルミネーター LED-100
¥120,000 **¥96,000**

DP-MiniCCD
組合せ例



モノクロフォトプリンター
UP-X898MD ㊦㊰㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
¥225,000



フォトプリンターセット
CP1200set ㊰㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
¥20,000

(製造元)

バイオツールズ株式会社

(お問い合わせ先)

IEDA 家田貿易株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷3-14-16 TEL.03-3816-2861 FAX.03-3814-5347
〒564-0053 大阪府吹田市江の木町13-9 TEL.06-6338-1518 FAX.06-6338-5626
第6マイタビル401

URL: <http://www.ieda.co.jp/boeki>