

HYUNDAI MICRO社は、フィルター事業で培った高度な技術と
豊富な実績を基盤として、バイオサイエンス分野へも事業を展開しています

信頼の品質と無駄のないコスト設計 HM Spin Column



無料サンプル

ご用意しています


市販、核酸精製キットのバッファ使用でコストダウン！
フタ付きスピncラム+回収用チューブが付属します

RNA

ct値

(1) A社 29.0 / HM社 28.8
(2) A社 33.8 / HM社 33.9

A社(1) HM社(1) A社(2) HM社(2)

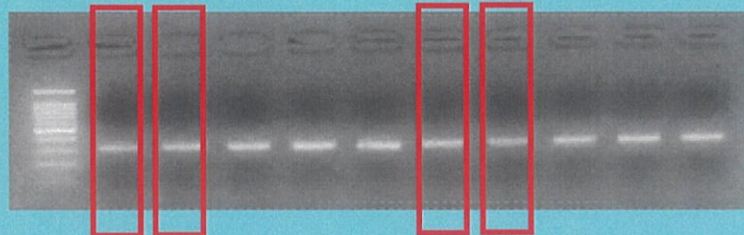

RNA抽出キットでの検証結果

サンプル

(1) 血清 (2) 鼻腔スワブ

ct値、電気泳動のいずれも

市販キットのカラムと比べても同等の性能です

* 国内分析機関で検証


* 他のレーンはHM社、国内未発売のカラムです

DNA

ct値

(1) A社 22.0 / HM社 22.2
(2) A社 24.0 / HM社 18.7

A社(1) HM社(1) A社(2) HM社(2)

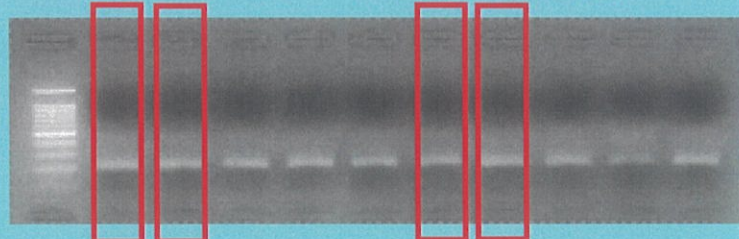

DNA抽出キットでの検証結果

サンプル

(1) 血液1 (2) 血液2

ct値、電気泳動のいずれも

市販キットのカラムと比べても同等の性能です

* 国内分析機関で検証

* 他のレーンはHM社、国内未発売のカラムです

H4211GC-R

Spin column (Spin column + Collection tube) 50ea / pk

定価7,000円 (税抜)

* 本製品はRNase/DNase free、Non-pyrogenic、Endotoxin freeです。

幅広いアプリケーションでご採用いただいております
まずは無料サンプルをお試ください

ご用命はこちらまで



家田貿易株式会社