

DOT COUNTER・DOT4 MANUAL COLONY COUNTER



多機能マニュアルコロニーカウンター
(シャーレ&プレート用)

Manual Colony Counter

これまでのマニュアルコロニーカウンターの問題点をすべて解決した多機能のコロニーカウンターです。シャーレだけでなく、研究室で使われるマイクロプレートで染色した細胞の観察にも使用できます。またフィルターからガラス板に変更すれば暗視野での観察も可能です。




IEDA TRADING CORPORATION

DOT COUNTER・DOT4 マニュアルコロニーカウンター

本体

4段階のアーム角度

タッチペン

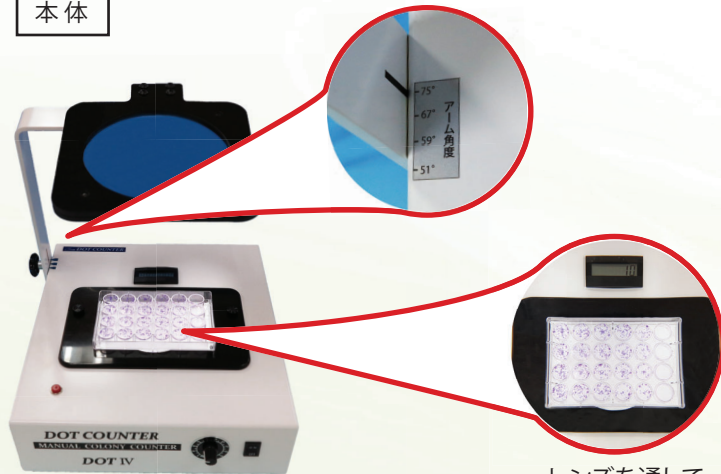

レンズを通して
カウントが見えます。





マッキーやマイネームなどの太さ10～11mmφ
の市販のマーカーが使用できます。

特長

- シャーレとマイクロプレートの両方が使用できます。
- 明視野と暗視野のどちらでも観察できます。
- 照明はちらつきのないLEDを使用しているため均一で長寿命です。
- 調光付きのため、サンプルに応じて光の量を調節できます。
- カウントはペンに反応するタッチペン式のため軽く高速でカウントできます。
- 拡大鏡は大きな130mm2倍アクリルレンズを使用しているため視野が広く目が楽です。

寸法

角度調節

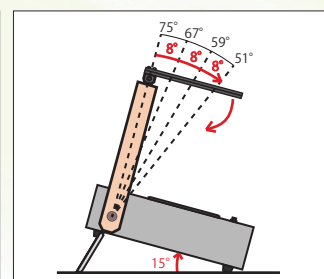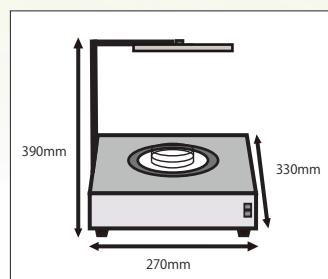

PEN COUNTER ペンカウンター



ピッピツ・・・
カウントブザー付き



市販のマーカー
が使える!

カタログNO.	品 名	内 容	価 格
DOT4	ドットカウンターDOT4 (シャーレ&プレート用)	本体、タッチペン、乳白色フィルター、ガラス板、ACアダプター、マッキー1本	¥280,000
DOT4S	ドットカウンターDOT4 (シャーレ専用)	本体、タッチペン、乳白色フィルター、ガラス板、ACアダプター、マッキー1本	¥280,000
DOT-PEN	ペンカウンター	本体、タッチペン、マッキー1本、単三電池 2本	¥28,000

 **家田貿易株式会社**

〒113-0033 東京都文京区本郷3-14-16 オフィス家田

〒001-0015 北海道札幌市北区北15条西2丁目2-11 チケン北大前105号室

〒980-0821 宮城県仙台市青葉区春日町10-23 第1春山ビル2階H号

〒564-0053 大阪府吹田市江の木町13-9 江坂シビル館II 401

〒861-8035 熊本県熊本市東区御領6-7-39

〒901-0146 沖縄県那覇市具志1丁目9番21号 CASA ZERO 102号室

E-mail: boeki@ieda-group.co.jp

URL: <http://www.ieda.co.jp/boeki/>

TEL.03-3816-2861 FAX.03-3814-5347

TEL.090-2226-5660 FAX.011-709-2755

TEL.022-395-9878 FAX.022-395-9879

TEL.06-6338-1518 FAX.06-6338-5626

TEL.096-285-1907 FAX.096-285-1908

TEL.090-2210-7721 FAX.098-859-6271