

バイオセーフティーパック

BIO SAFETY PACK B.S.PACK

UN2900, UN2814, UN3373 危険物輸送用容器



BIO SAFETY PACKについて


バイオセーフティーパックは、感染性のある物質や病原性のある菌体の輸送を目的として開発された輸送用コンテナで、空路、陸路、航路における輸送を目的とした規定の条件をすべて満たしています。この感染性物質はIATA(国際航空輸送協会)の危険物規則書やWHO(世界保健機構)のガイダンスや国連勧告のなかで、危険物の分類区分6.2に定義され、特に人や動物に致命的な危害を与えるものをカテゴリ-A、それ以外のものをカテゴリ-Bとして分類しています。家田貿易(株)ではカテゴリ-A用としてBSP150、カテゴリ-B用としてDSP150、それぞれの容器の冷蔵/冷凍輸送容器としBSP-COOLをご用意いたしました。

分類	カテゴリ-A	カテゴリ-B	カテゴリ-A, B両用
カタログNO.	BSP150	DSP150	BSP-COOL
包装基準	PI620	PI650	PI904

バイオセーフティーパック・BSP150

カテゴリーA用


バイオセーフティーパックBSP150は、危険物分類区分6.2のカテゴリーA用の輸送容器です。セットには、ラベルや緩衝材、危険物申告書などの必要な備品が全て含まれております。箱に表記されている国連番号の4GUは、一次容器の材質に制約が無い事を表しています。また、BSP150の許容量は、一次容器と内容物の最大総質量が96gで設計しています。旅客機での輸送の場合は、輸送規則にもとづいて50mLもしくは50g以下でパッキングしてください。

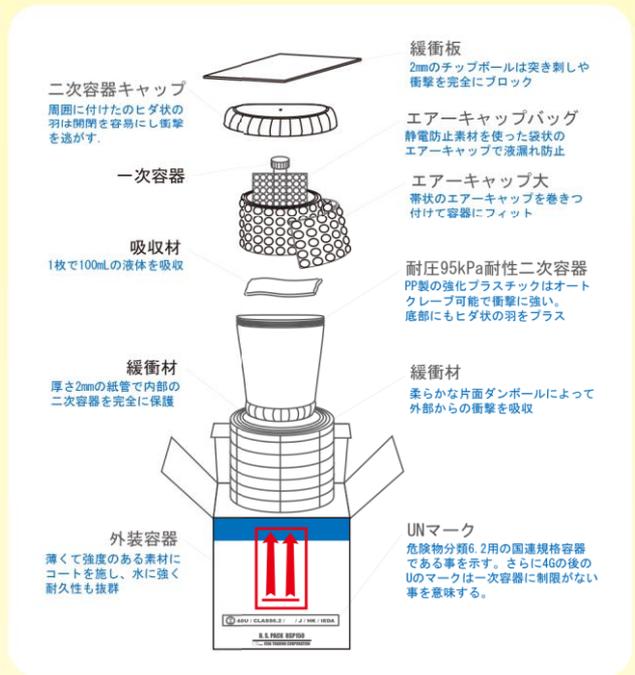


在庫限りで販売終了

《バイオセーフティーパックBSP150》

カタログNO.	分類	品名	入数	価格
BSP150	カテゴリーA	バイオセーフティーパック BSP150	12	¥42,000
BSP150S			4	¥14,800

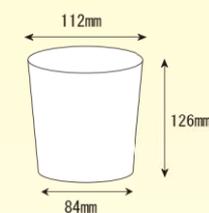

PP製二次容器内寸

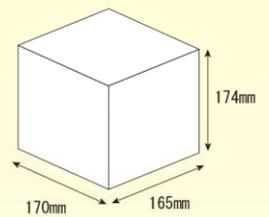

BSP150外寸

《オプション》

危険物6.2ラベル



型番：BSP-LA62
入数：50枚
価格：¥10,000

エアークラップ大



販売終了

型番：BSP-AIR
入数：50枚
価格：¥5,000

吸収材



型番：BSP-FX
入数：100枚
価格：¥10,000

緩衝材



型番：BSP-DK
入数：20個
価格：¥6,000

宛名ラベル



型番：BSP-NAME
入数：50枚
価格：¥10,000

緩衝板



型番：BSP-BK
入数：50枚
価格：¥6,900

エアークラップバッグ



販売終了

型番：BSP-BAG
入数：50枚
価格：¥5,000

BSP150外装容器



型番：BSP-OUTER
入数：10枚
価格：¥10,000

PP製二次容器




販売終了

型番：BSP-150P
入数：10個
価格：¥10,000

バイオセーフティーパック・DSP150

カテゴリーB用


バイオセーフティーパックDSP150は、危険物分類区分6.2のカテゴリーB用の輸送容器です。セットには、緩衝材などの必要な備品が全て含まれています。また、DSP150の許容量は、一次容器と内容物の最大総質量が96gで設計しています。

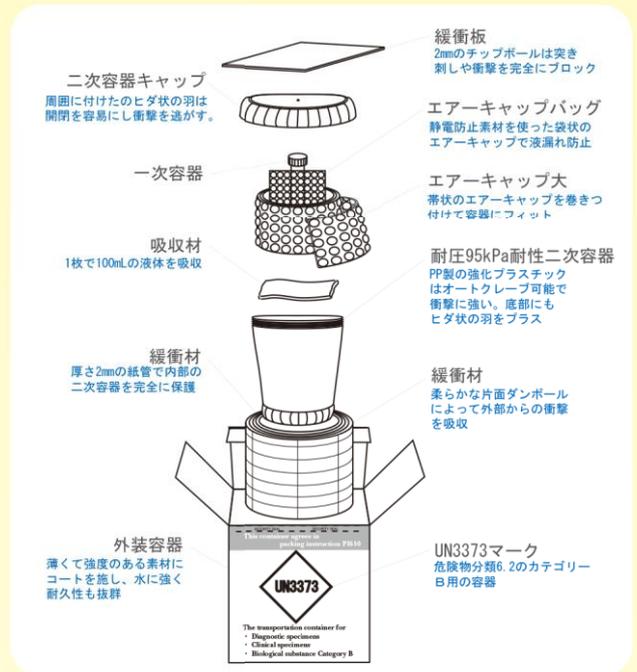

在庫限りで販売終了

《バイオセーフティーパックDSP150》

カタログNO.	分類	品名	入数	価格
DSP150	カテゴリーB	バイオセーフティーパック DSP150	12	¥36,000
DSP150S			4	¥13,200

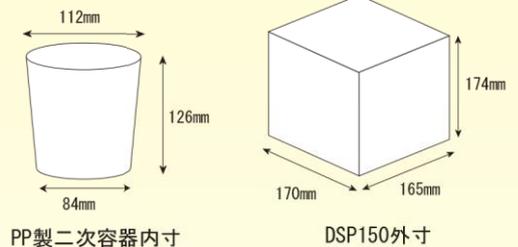

《オプション》

DSP150外装容器

型番: DSP-OUTER
入数: 10枚
価格: ¥10,000

BSPシール

型番: BSP-SEAL
入数: 120枚
価格: ¥7,200

エアークャップ大

販売終了

型番: BSP-AIR
入数: 50枚
価格: ¥5,000

吸収材

型番: BSP-FX
入数: 100枚
価格: ¥10,000

緩衝材

型番: BSP-DK
入数: 20個
価格: ¥6,000

緩衝板

型番: BSP-BK
入数: 50枚
価格: ¥6,900

エアークャップバッグ

販売終了

型番: BSP-BAG
入数: 50枚
価格: ¥5,000



PP製二次容器

販売終了

型番: BSP-150P
入数: 10個
価格: ¥10,000

バイオセーフティーパック・BSP-COOL

バイオセーフティーパックBSP-COOLは、バイオセーフティーパックBSP150やDSP150などの危険物輸送容器をドライアイスやアイスパックとともに梱包して輸送する冷蔵・冷凍輸送用容器です。危険物容器をオーバーパックで梱包するため、外装容器に適切な危険物ラベルと表示を施し、さらにOVER PACKのラベルを添付します。セットには必要なラベルなどの備品が全て含まれています。(BSP-COOLにBSP150もしくはDSP150を梱包する場合、ドライアイスは10kg用意してください。)

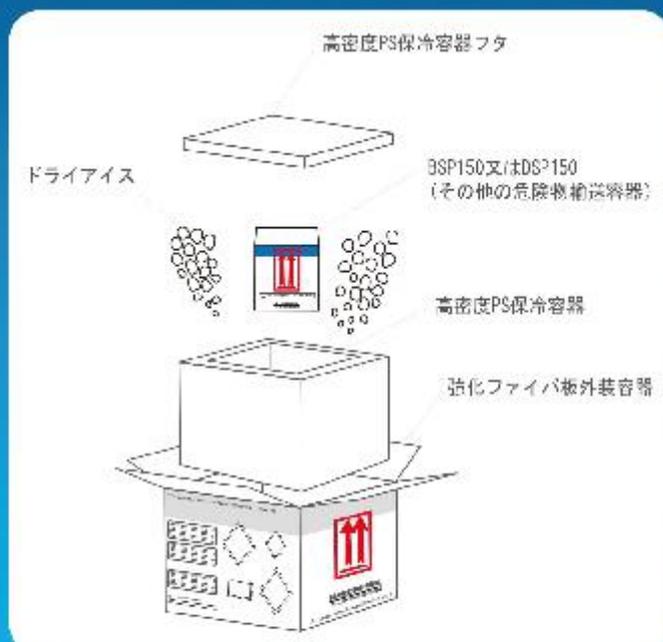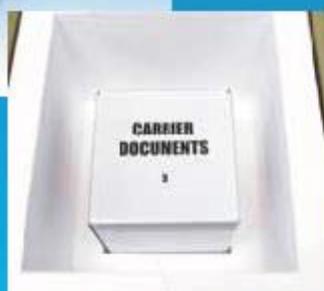


在庫限りで販売終了

※W175mm×D175mm×H25mmの段差が付いています。

《バイオセーフティーパックBSP-COOL》

カタログNO.	分類	品名	入数	価格
BSP-COOL	カテゴリー A, B両用	バイオセーフティーパック 保冷容器	2	¥30,000
HSP-COOLS			1	¥16,000

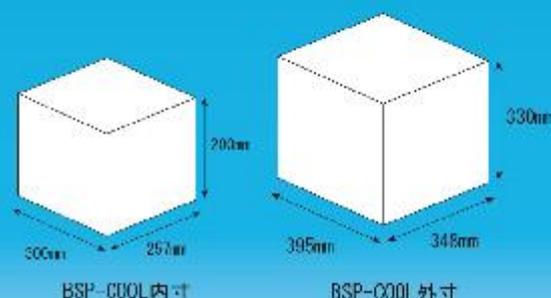

《オプション》

<p>危険物6.2ラベル</p> <p>型番: BSP-I A02 入数: 50枚 価格: ¥10,000</p>	<p>ドライアイスラベル</p> <p>型番: BSP-DRY 入数: 50枚 価格: ¥5,000</p>	<p>危険物9ラベル</p> <p>型番: BSP-I A01 入数: 50枚 価格: ¥10,000</p>	<p>UN3373ラベル</p> <p>型番: BSP-I A3373 入数: 50枚 価格: ¥8,000</p>	<p>BSP-COOL外装容器</p> <p>販売終了</p> <p>型番: BSP-COOLD 入数: 5枚 価格: ¥5,000</p>
	<p>オーバーパクラベル</p> <p>型番: BSP-OVER 入数: 50枚 価格: ¥3,000</p>	<p>宛名ラベル</p> <p>型番: BSP-NAME 入数: 50枚 価格: ¥10,000</p>	<p>BSP-COOL発泡容器</p> <p>型番: BSP-COOLPS 入数: 2個 価格: ¥17,000</p>	

(発売元) **家田貿易株式会社**
<http://www.ieda.co.jp/ieeda/>
 E-mail: iedat@ieeda.com, ieeda@ieeda.com
 札幌支店 〒054-0015 北海道札幌市中央区南一条西2丁目5-11ケンビル大層100号
 仙台支店 〒981-0851 宮城県仙台市青葉区青葉10-3321白山ビル3階10号
 東京支店 〒110-0003 東京都中央区本町2-14-16 オフィスビル
 大阪支店 〒554-0850 大阪府吹田市工場の木町15-5 北東ビル内J401
 名古屋支店 〒461-0005 愛知県名古屋市中区栄5-7-29
 福岡支店 〒810-0116 福岡県福岡市東区下門9番21号 G&S 2F0102号
 TEL: 022-5529-6696 TEL: 070-511-705-5755
 TEL: 025-255-5818 FAX: 025-255-5819
 TEL: 03-3016-2061 FAX: 03-3016-5047
 TEL: 06-6220-1510 FAX: 06-6220-5426
 TEL: 066-238-1907 FAX: 066-238-1908
 TEL: 092-2210-7721 TEL: 092-090-889-6271

(販売店)